

EDM NITI FILE RENDSZER



HyFlex EDM – OGSF Sequence

Vedd a kezébe az irányítást

 COLTENE

HyFlex EDM

Kiváló törésállóság

fájlok a biztonságosabb kezelés érdekében

A HyFlex EDM reszelők egyedi felülettel rendelkeznek, és kiemelkednek tartósságukkal és nagy törésállóságukkal. Ezt egy innovatív gyártási eljárással érik el, „elektromos kislüési megmunkálás” (EDM) alkalmazásával. Ezenkívül a HyFlex reszelők nikkeltitán ötvözetből készülnek Controlled Memory hőkezeléssel (CM).

A rugalmasság és a törésállóság teljesen egyedülálló kombinációja lehetővé teszi a gyökérkezelések során tisztításhoz és formázáshoz szükséges HyFlex EDM reszelők számának csökkentését anélkül, hogy a gyökércsatorna anatómiájának megőrzését veszélyeztetnénk. A rozsdamentes acél reszelőhöz hasonlóan a HyFlex EDM reszelő is előhajlítható. Ez döntő előny az ívelt gyökércsatornáknál, hogy elkerüljük a lépcsők kialakulását.

Többször is biztonságosan regenerálható

A viselkedés visszaállítása lehetővé teszi az autoklavozás utáni vizuális kontrollt, és a többszöri felhasználást



✓ Készen áll a biztonságos újrafelhasználásra



✗ Sodratlan (eldobás)

A HyFlex EDM NiTi beépített alakmemóriával rendelkezik. Spirális alakjuk megváltoztatásával megakadályozzák a stresszt a felkészülés során. Ez a változás gyorsan visszafordítható autoklavozással, hogy a műszerek visszanyerjék eredeti formájukat.

Ha a tű hevítés után nem nyeri vissza alakját, pasztikusan deformálódik, ami növeli a törés kockázatát. Szemrevételezés után nem szabad használni.




Elősterilizálás

Azonnal használható



Kiváló törésállóság

Biztonságosabb kezelés az egyedi edzett felületnek köszönhetően

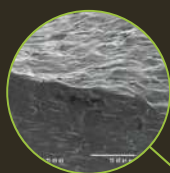

Erőteljes vágási teljesítmény

Kevesebb számú fájl szükséges a gyors előkészítéshez



Rendkívül rugalmas és előhajlítható

Az egyenletesen, központosított előkészítés csökkenti a párkány vagy a perforáció kockázatát a szabályozott memóriahatás miatt




Variable Cross Section Design

Hozzájárul a magas törésállósághoz

Háromszög keresztmetszet a tetején

Trapéz keresztmetszet a közepén

Négyszög keresztmetszet a csúcson

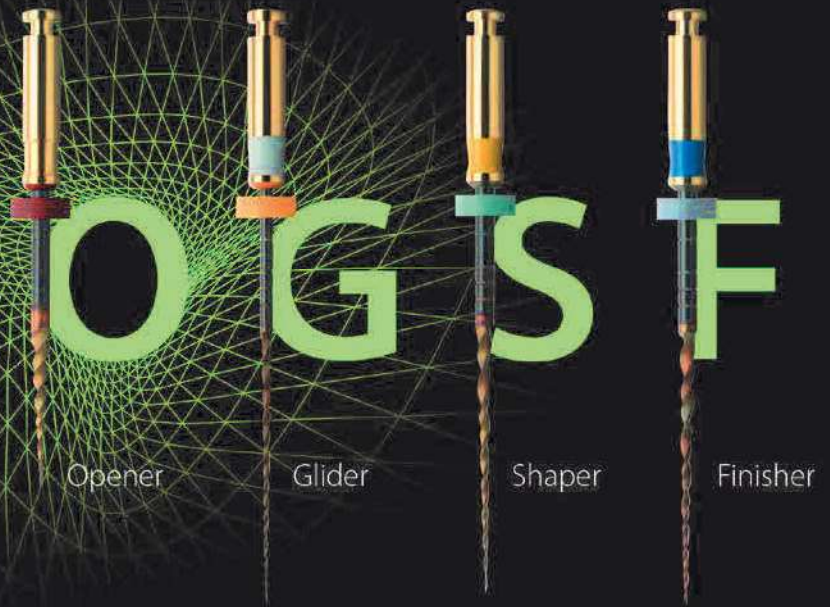

OGSF Sequence

Az új HyFlex EDM fájlok sorozatként való használatra tervezték


**Azt mondtad, gyors és biztonságos?
Fedezze fel az új sorozatmegoldást!**

A HyFlex EDM fájlrendszer testre szabott megoldást kínál egyszerű és összetett gyökércsatorna-anatómiák gyors és megbízható elkészítéséhez. A bizonyítékok azt mutatják, hogy az ellenőrző listák alkalmazásával és a szabványos eljárások követésével nő a reprodukálhatóság és a biztonság. Erre a felismerésre alapozva a COLTENE új HyFlex EDM fájlokat kínál, amelyeket úgy terveztek, hogy egyetlen, egyenes protokollt tartalmazó szekvenciaként használhatók.

Az új HyFlex EDM OGSF szekvencia tartalmaz egy új Orifice Opener és Glidepath fájlt a siklópálya megnyitásához, valamint egy Shaping fájlt a gyökércsatorna teljes hosszában történő formálásához. A meghatározott kezelési eljárás megkönnyíti a felkészülést és röviden tartja a tanulási görbét. A Prof. Pedullával együttműködve kialakított optimalizált csúcsméreték és kúpos illeszkedésnek köszönhetően a reszelők sima érzést biztosítanak, amikor egyik reszelőről a másikra váltanak, és segítenek megőrizni a kezelést.

Tulajdonságok és előnyök

- Hatékony kezelés nagy vágási teljesítménnyel
- Magas törésállóság és rugalmasság
- A csatorna központositott előkészítése
- Csak egy alakító fájl
- Steril buborékfólia
- 2 hosszúság: 21 és 25 mm

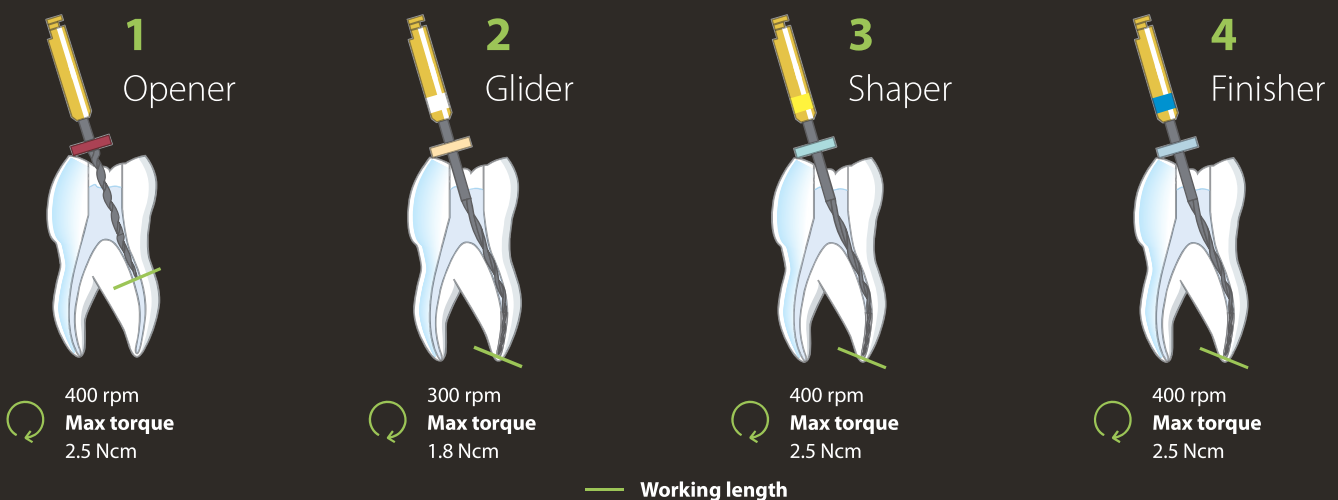

Rendelési információ

Formálás

HyFlex EDM OGSF Set, 4 pcs	21 mm	25 mm	
OGSF Sequence	60036141	60036142	
HyFlex EDM OGSF Refills, 3 pcs	18 mm	21 mm	25 mm
Orifice Opener 18/.11	60036140	-	-
Glidepath File 15/.03	-	60023493	60023492
Shaping File 18/.045	-	60036136	60036137
Finishing File 30/.04	-	60036138	60036139
HyFlex EDM Finishing File, 3 pcs	21 mm	25 mm	
Finishing File 40/.04	60022271	60019597	
Finishing File 50/.03	60022272	60036598	
Finishing File 60/.02	60022274	60036599	

Szártás és lezárás

Size / Taper	HyFlex EDM Paper Points, 100 pcs	HyFlex EDM Guttapercha Points, 60 pcs
30/.04	60036503	60036504
40/.04	60022676	60022708
50/.03	60022741	60022709
60/.02	60022740	60022710



Opener



Glider



Shaper



Finisher

Endo útmutató

Gyakorlati. Újító. Mutatja az utat.

A COLTENE egyszerű, biztonságos és hatékony megoldásokat kínál az endodontia minden lépésére.



Fertőzés
Kontroll



Tisztítás &
Formálás



Irrigáció &
Szárítás




Lezárás



Restauráció

office@pannondental.hu



Pannon Dental Kft
8200 Veszprém, Kistó u. 25/B
www.pannondental.hu

 COLTENE